

SPÉCIFICATIONS

Le piédestal pour services électriques et de gaz médicaux est un modèle Amico de la série Alert-1.




Le piédestal est construit sur une armature d'acier et recouvert d'une coquille d'acier inoxydable d'un fini satiné # 4 offrant une apparence soignée et esthétique.

Les points d'utilisation des gaz médicaux de type muraux, les prises électriques duplex, ivoire ou rouge ou orange, les glissières pour les bouteilles collectrices d'aspiration médicale, le cas échéant, sont installés en usine sur une ou l'autre des parois du piédestal et selon les dessins d'ateliers approuvés.

Les prises électriques sont installées dans des boîtes brutes, dites électriques, et sont munies de fils électriques de raccordement; cependant elles ne sont pas pré filées.

Deux modèles de piédestal sont offerts et les deux sont reconnus par les codes canadiens CUL et américains UL :

18po x 10po x 20po = Large coquille
12po x 10po x 20po = Petite coquille

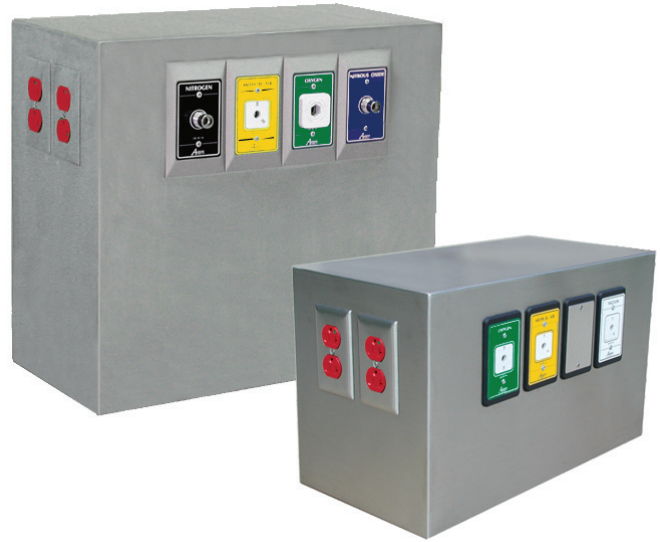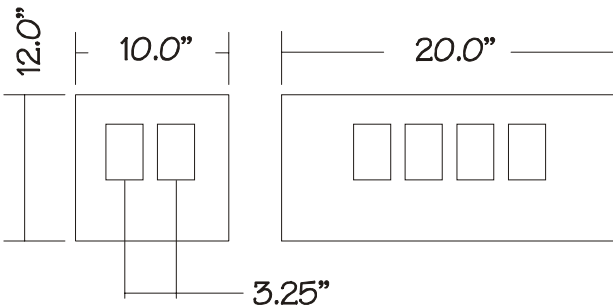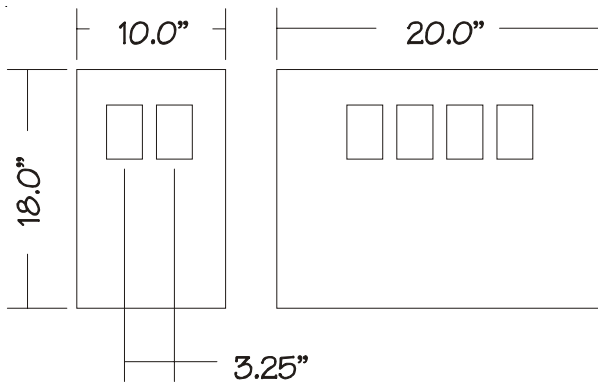


CARACTÉRISTIQUES:

- Il appartient au concepteur et /ou au propriétaire de déterminer les services requis ainsi que leur positionnement sur le piédestal.
- La disposition des points d'utilisation de type modulaire des gaz médicaux est régie par certains articles des codes NQ5710-500 et CSA Z305-1, quant à la distance à maintenir entre chacun des services de gaz médicaux
- La construction du piédestal doit permettre l'accès à l'intérieur pour des fins d'entretien et de réparations.
- Tous les produits Amico sont conçus pour une installation selon les codes NQ 5710-500 et CSA Z 305-1

PROJET:


LES INFORMATIONS POUR L'INSTALLATION

Petit piédestal

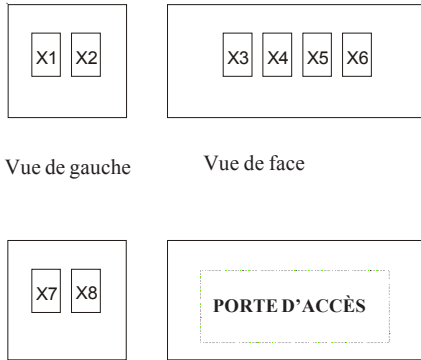

NUMÉRO DE MODÈLE
E-PEDESTAL-12

Grand piédestal

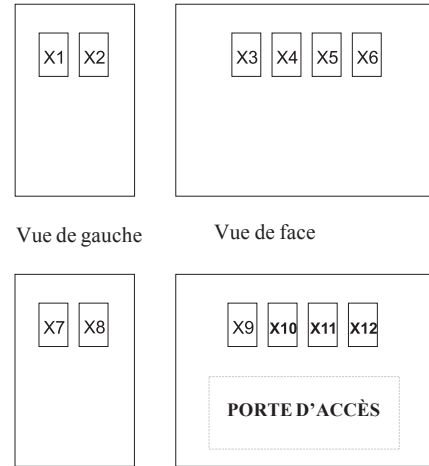

NUMÉRO DE MODÈLE
E-PEDESTAL

DISPOSITION DES SERVICES	
X1	
X2	
X3	
X4	
X5	
X6	
X7	
X8	
X9	
X10	
X11	
X12	

← Veuillez identifier les services électriques et de gaz médicaux requis

LE DESSIN DES DIMENSIONS POUR L'INSTALLATION AU PLANCHER

